


12F 各區室落菌數監測結果

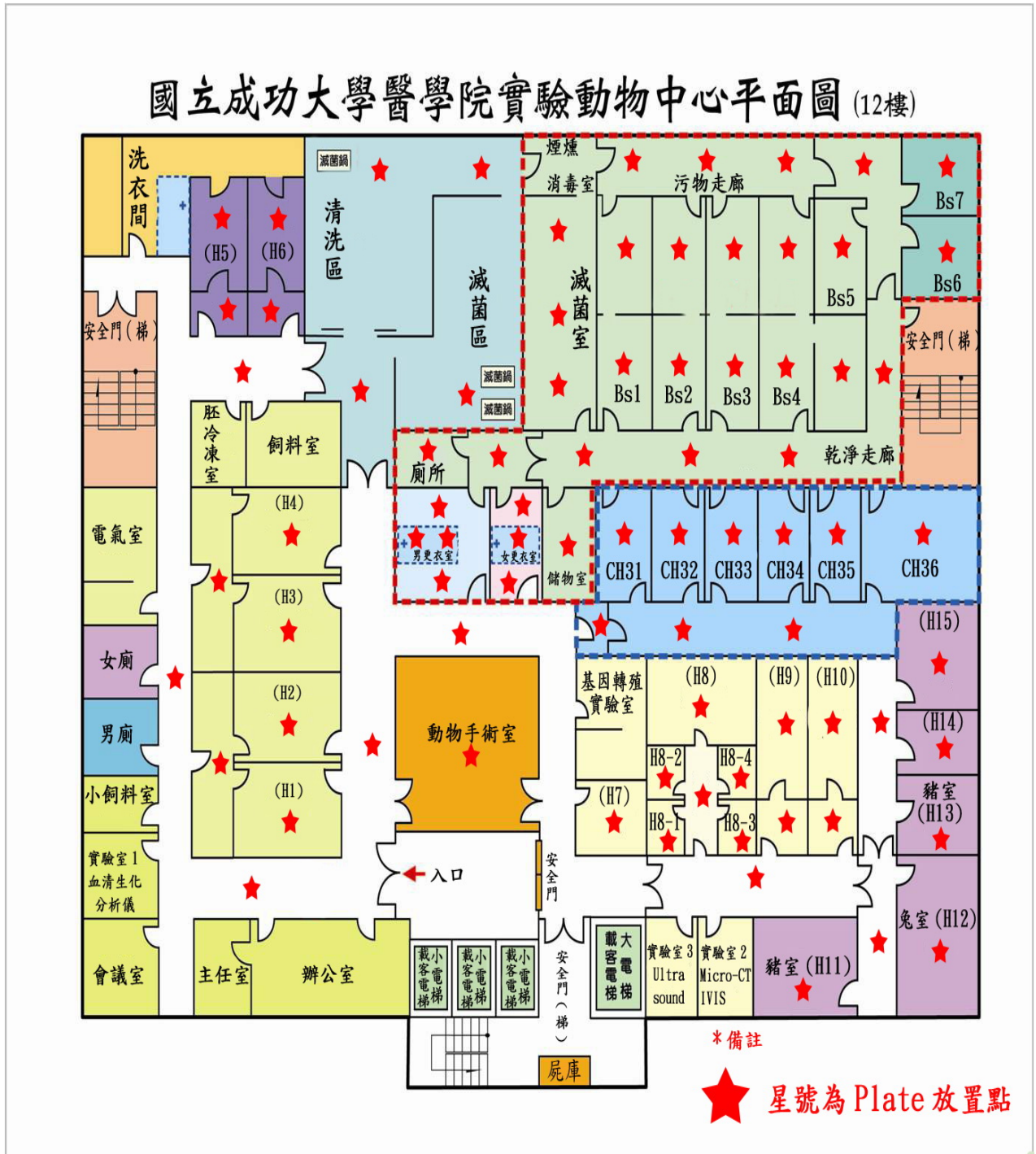

編號	區室	3月	4月	5月	7月	8月	10月	12月
BS 區								
1	BS 入門口走道	-	2	8	4	27	9	8
2	B-1 小鼠種源	1	2	0	2	0	1	1
3	B1 操作檯	0	0	0	0	0	0	0
4	B1 Isolater	-	0	0	0	0	-	-
5	B-2 小鼠繁殖	2	3	2	22	1	2	2
6	B-3 小鼠繁殖	3	3	27	7	0	6	5
7	B-4 小鼠 stock	3	6	6	10	9	2	2
8	B4 操作檯	-	0	-	0	0	0	-
9	B-5 大鼠 stock	23	13	33	118	45	12	13
10	B-6 大鼠繁殖	0	17	55	134	12	4	4
11	B6 操作檯	-	0	31	6	0	5	0
12	B-7 大鼠繁殖	0	3	5	22	10	2	2
13	B7 操作檯	-	0	2	9	4	1	0
14	污走道	2	5	1	57	1	1	1
15	水槽	-	-	-	165	0	1	1
16	淨走道	0	3	2	1	2	1	1
17	滅菌室	3	1	0	1	0	1	1
18	管理室	0	2	0	0	0	0	0
19	廁所	5	2	18	1	1	7	7
20	女浴室	7	6	1	17	2	3	4
21	男浴室	0	2	4	0	0	3	3
Clean 區								
22	潔淨區前室	0	1	7	1	0	0	0
23	CH31 實驗室	0	0	0	1	0	1	1
24	CH32 小鼠 IVC 代養室	0	0	0	0	0	1	1
25	CH32 操作台	0	0	0	0	0	0	0
26	CH33 小鼠 IVC 代養室	1	2	0	0	12	2	1
27	CH33 操作台	-	0	1	0	0	0	0
28	CH34 小鼠 IVC 代養室	0	3	0	0	0	0	1
29	CH34 操作台	-	0	0	0	0	0	0
編號	區室	3月	4月	5月	7月	8月	10月	12月

Clean 區								
30	CH35 大鼠 IVC 代養室	0	0	0	0	0	0	0
31	CH35 操作台	-	-	-	-	-	0	0
32	CH36 實驗室	0	0	0	0	3	0	4
33	潔淨區走廊	0	1	1	1	1	0	0
代養區								
34	H1 小鼠加蓋代養室	7	6	4	0	10	6	5
35	H1 操作檯 A	0	0	0	0	0	0	0
36	H1 操作檯 A	0	1	0	0	0	0	0
37	H2 小鼠加蓋代養室	31	2	1	0	14	4	3
38	H2 操作檯 A	0	0	0	0	7	1	1
39	H2 操作檯 B	-	0	0	0	0	0	0
40	H1,2 前室	22	0	0	0	11	4	4
41	H3 小鼠代養室	10	32	30	45	96	35	3
42	H3 操作檯 A (103.12 啟用)		-	-	-	-	-	0
43	H4 大鼠代養室	15	10	15	26	40	23	1
44	H3,4 前室	5	9	3	2	2	9	4
45	H1~H4 前走道	20	1	17	19	26	7	8
46	H5 代養室	2	0	5	7	10	1	1
47	H5 操作檯	0	0	0	0	3	0	0
48	H5 前室	2	0	8	2	8	8	6
49	H6 感染室	2	0	0	0	3	1	1
50	H6 操作檯 A	0	0	0	1	0	1	0
51	H6 操作檯 B	-	1	0	0	0	0	0
52	H6 前室	13	0	0	1	5	2	2
53	H5、H6 前走道	2	-	5	75	54	2	6
54	H7 基因轉殖加蓋代養室	1	0	2	1	2	8	6
55	H7 操作檯	0	0	0	0	1	1	0
56	H7 前走道	-	12	2	5	23	9	8
57	H8 代養室	56	32	32	4	15	3	15
58	H8 操作台	-	-	-	-	3	0	
59	H8-1 代養室	8	6	2	214	103	19	15
60	H8-2 加蓋代養室	0	5	0	2	4	0	4
61	H8-3 代養室(103.4 改為檢疫室)	-	-	-	-	-	-	-
編號	區室	3月	4月	5月	7月	8月	10月	12月

代養區								
62	H8-3 檢疫室 (103.4 啟用)	-	0	0	4	0	1	1
63	H8-3 檢疫室操作台	-	-	-	-	-	1	0
64	H8-4 代養室 (104.7 啟用)	-	-	-	113	35	10	9
65	H8-4 操作台 (103.6 停用)	0	2	1	-	-	-	-
66	H8 前室	15	7	9	85	6	7	6
67	H9 大鼠代養室	59	10	39	68	72	62	20
68	H9 前室	14	42	17	8	32	13	13
69	H10 小鼠代養室	59	27	29	91	104	51	23
70	10 前室	5	2	0	8	0	26	21
71	H8,9,10 前走道	33	12	48	11	24	5	5
72	H11 豬室	999	999	574	948	736	516	589
73	H11-12 前走道	47	136	74	41	66	17	18
74	H12 兔室	37	62	47	40	80	23	24
75	H13 豬室	700	799	895	476	29	122	201
76	H14 大鼠代養室	35	10	40	44	41	17	40
77	H15 小鼠代養室	13	43	75	218	39	8	51
78	H14-15 前走道	-	74	118	25	26	15	14
手術區								
79	手術室	11	32	4	5	5	5	6
80	手術室前走道	12	12	4	8	25	4	5
81	辦公室前走道	6	20	2	8	29	8	9
清洗區								
82	清洗室走道	13	6	10	4	8	4	4
83	滅菌鍋前	6	6	7	8	1	0	0
84	墊料裝填區	12	4	3	6	0	1	1
85	洗籠機前區	70	14	4	75	30	301	21

1. BBLTM Stacker™ Plate TSB II，5% Sheep blood (Becton, Dickinson)。
2. 方法：打開 Plate 上蓋，置於房間中央 30 分鐘，30 分鐘後蓋好上蓋，置入 37°C 培養箱中培養 48 小時，取出後計算落菌數量。